



YpsoPen®

选择 久经考验的解决方案



swiss  design

易操作、可重复使用的可调剂量注射笔

- 直观可靠的剂量可调处理念，更易于患者接受
- 剂量设定和校正操作简单，更好地确保患者舒适度
- 卡口连接和丝杠平滑退回，便于快速更换笔芯
- 用于胰岛素和其它多剂量疗法
- 旨在实现简易操作和高性价比



Ypsomed输注系统


YPSOMED
自我护理解决方案




YpsoPen® – 易操作、可重复使用的注射笔

简单调节，方便注射


YpsoPen® 是一款便携式可变剂量胰岛素笔，可提供舒适的操作体验和高水平的患者接受度。

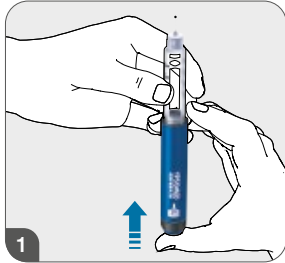

1 准备

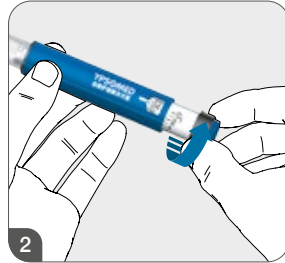

2 剂量调节

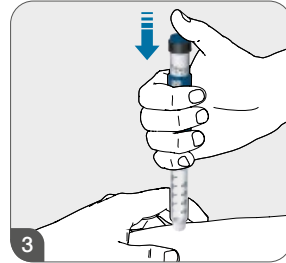

3 注射



成熟的注射笔技术

旨在实现简易操作和高性价比

操作

- 具有高对比度的剂量显示，对于视力不佳的患者也有良好的可读性
- 笔芯架配备卡口连接和丝杠平滑推动，可快速便捷地更换笔芯
- 刻度剂量可调处理理念，确保较高的患者接受度并减少患者培训工作
- 定量、剂量校正和给药过程中提供声音及触觉反馈，旨在增强患者信心
- 注射后剩余剂量指示，以确保直至最后一个单位的剂量准确性



通过旋转刻度设定剂量，直观便捷。齿轮装置提供明显、易读的印刷数字。

定制与制造

- 极具吸引力的定价，在越来越具备成本意识的市场竞争中脱颖而出
- 坚固耐用的设计，最大限度地降低投诉率，确保注射笔 3 年的使用寿命
- 平台装置 — 为您的药物轻松提供客制化



YpsoPen®



设计与定制

您的药物值得拥有独一无二的外观

YpsoPen® 的笔帽和笔身可定制不同的颜色，而且可以根据客户要求定制印刷



尺寸与规格

事实与数据




装置规格

| | |
|-----------|--|
| 主容器 | 标准 3ml 笔芯，符合 ISO 11608-3， 卡式瓶内径是9.7mm |
| 灌装容量 | 3ml |
| 最少剂量/剂量单位 | 0.01 ml |
| 最大剂量 | 0.60ml |

| | |
|--------|--|
| 剂量单位数 | 60 |
| 兼容针头类型 | 与标准*和安全注射笔针头兼容 – 推荐使用 Ypsomed Clickfine® 和 Penfine® Classic 针头 |

* 符合 ISO 11608-2 的注射笔针头

卡式瓶尺寸 (mm)

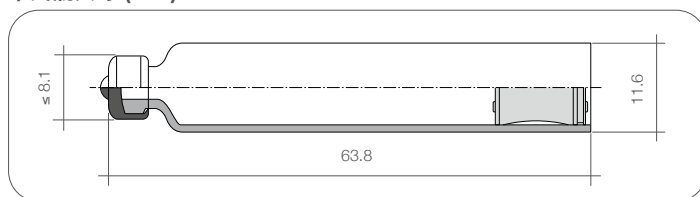

您的给药系统

采用我们的经验和竞争力

- Ypsomed 拥有超过 30年的注射装置开发和制造经验，大量装置已在市场上销售。
- 如需定制该注射笔的工业设计，展示其剂量准确性及编制具体的技术文件，则您可以向 Ypsomed 获取高质量的支持服务。
- YpsoPen® 已在中国注册为与胰岛素一起使用的 II 类医疗器械。



Ypsomed输注系统



注射笔系统



自动注射器系统



帖式输注系统



智能服务

Ypsomed输注系统为生物制药公司提供全系列的药物输注产品和服务。
我们提供从设计开发到制造和包装的一切服务。

医沛生医疗器械技术咨询(北京)有限公司 // 北京市朝阳区东三环北路8号院6号楼12层1201内1201室 //
邮编: 100004 // info@ypsomed.cn // www.ypsomed.cn // 电话: 0086 10 6461 5168